

複合美顔器

# Emion Lift 取扱説明書

この度は Emion Lift をお買い上げ頂き  
誠にありがとうございます。



お使いになる前に、この取扱説明書を必ずお読みになり正しくお使いください。  
保証書もかねておりますので、お読みになったあとは大切に保管してください。

## 安全上のご注意 (必ずお守りください)

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他人への危害や損害を未然に防止するためのものです。

いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。



**危険**

誤った取り扱いをすると人が死亡または重傷を負う危険性が切迫して生じることが想定されている内容を説明しています。



**警告**

誤った取り扱いをすると人が死亡または重症を負う可能性が想定されている内容を説明しています。

お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示 (図記号) で区分し説明しています。(下図は絵表示の例です。)



必ず実行していただく「強制」内容を説明しています。



してはいけない「禁止」内容を説明しています。

## ▲ 危険



**禁止**

下記のような医用電気機器や家庭用電気治療器の近くでは絶対に使用しないでください。

- ペースメーカーなどの体内植込み型医用電気機器
  - 人工心肺などの生命維持用医用電気機器
  - 心電計や点眼器などの装着型医用電気機器
- (医用電気機器や家庭用電気治療器の誤動作、事故や体調不良の原因)

## ▲ 警告



**用途以外  
使用禁止**

本取扱説明書に記載されている用途以外で本製品を使用しないでください。ケガ・火災・感電・製品故障の原因になります。










**禁止**










下記の部位や場合には使用しないでください。

- 上まぶた ●ノド ●製品を使用する当日に脱毛処理をした部位
- 皮膚炎や過度の日焼けなど皮膚異常のある場合 ●整形手術をした部位
- 体調が優れない場合 ●飲酒や薬を服用中の場合
- 疲労の激しい場合 ●肌に傷や湿しん、腫れ物などのある部位





## ▲ 警告

 <p>禁止</p>	<p>下記に該当する方は使用しないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>●顔面の神経障害がある方</li><li>●熱さを自覚できない方</li><li>●敏感肌の方</li><li>●アレルギー体質の方</li><li>●皮膚病およびアトピー性皮膚炎の方</li><li>●生理中、妊娠中および産後1ヵ月以内の方</li><li>●目の手術を行ったことがある方 (レーシック手術を受けたことがある方は、かかりつけの医師にご相談の上で使用ください)</li><li>●心臓疾患の方</li><li>●糖尿病の方</li><li>●出血性疾患・血友病疾患などの血液異常がある方</li><li>●高血圧・歯の治療中である方</li><li>●網膜はく離である方 (あった方も含む)</li><li>●強度の近視 (-6D以上)の方</li><li>●骨折・整形などで顔面にメタル・シリコン・プラスチックなどの埋め込み手術を受けたことがある方</li><li>●幼児や成長期の子供および自分で意思表示ができない方</li></ul>
 <p>必ず守る</p>	<p>下記に該当する方はかかりつけの医師にご相談の上使用してください。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>●悪性腫瘍のある方</li><li>●急性疾患の方</li><li>●感染症疾患の方</li><li>●有熱性疾患の方</li><li>●今までに重病を患った方</li></ul>
 <p>分解禁止</p>	<p>本製品を分解、修理、改造しないでください。 ケガ・火災・感電の原因になります。製品の修理・交換は、製品をお買い上げいただいた販売店までご相談ください。</p>
 <p>落下・衝撃禁止</p>	<p>本体を落としたり、ぶついたり、衝撃を与えないでください。 製品の故障やケガの原因になります。</p>
 <p>必ず守る</p>	<p>本体は顔、デコルテ (首から胸元)、首のケアにのみ使用してください。 パッチテストを行う際は腕に使用してください。 肌を傷つけたり、炎症を起こすなどの原因になります。</p>
 <p>火災注意</p>	<p>本製品を充電する際は、必ず付属の充電器 (ACアダプタ) をご使用ください。また、充電器 (ACアダプタ) は電源タップやタコ足配線に接続せず、必ず家庭用コンセントへ直接接続してください。 発火や発熱により火災や故障の原因になります。</p>
 <p>禁止</p>	<p>本製品は充電電池を内蔵していますので、火の中に入れたり、加熱、高温・多湿の場所での使用・充電・放置はしないでください。 発火や発熱により火災や故障の原因になります。</p>

## ▲ 警告

 <b>禁止</b>	<p>本製品のバッテリーパックはリチウムイオン電池となり、その特性として寿命を過ぎて使い続けた場合に電池内部の化学反応によりバッテリーが膨らむなど変形する場合があります。また、高温などの環境下や外部からの衝撃によって変形する場合があります。本体が変形している場合は、感電や火傷の危険がありますので使用しないでください。</p>
 <b>水かけ禁止</b>	<p>充電器（ACアダプタ）に水をかけたり、水中に入れたりしないでください。ショート・感電・発火の原因になります。</p>
 <b>禁止</b>	<p>ACアダプタは濡れた手で触らないでください。ショート・感電・発火の原因になります。</p>
 <b>禁止</b>	<p>ACアダプタは交流 100V ～ 240V 以外では使用しないでください。火災・感電の原因になります。</p>
 <b>使用者の制限</b>	<p>お子様には使用せず、お体の不自由な方は付き添いなしで使用しないでください。製品の故障やケガの原因になります。</p>
 <b>小児付近 放置禁止</b>	<p>乳幼児や小さいお子様の付近に商品を放置したり、使用・保管しないでください。ケガ・火災・感電・故障の原因になります。</p>
 <b>必ず守る</b>	<p>使用前にヘッドが割れていたり、欠けていたり、変形していないかなど本体の破損がないか確認してください。肌を傷つける原因になります。</p>
 <b>禁止</b>	<p>化粧水やジェル等が電極に塗布されている状態で出力したまま本体を放置しないでください。Emion Lift 専用以外の化粧水やジェル等をご使用になると、電極部分が発熱しやけどや故障の原因になる場合があります。</p>
 <b>必ず守る</b>	<p>ご使用になる化粧水やジェル等は Emion Lift 専用のものをお勧めします。Emion Lift 専用以外の化粧水やジェル等をご使用になると、電極部分が発熱しやけどや故障の原因になる場合があります。</p>


# 内容物

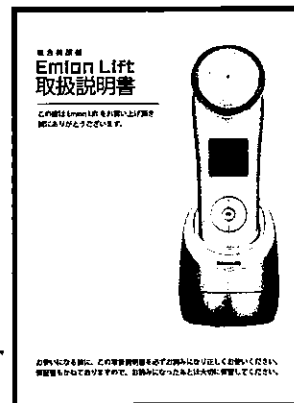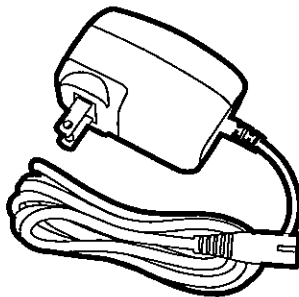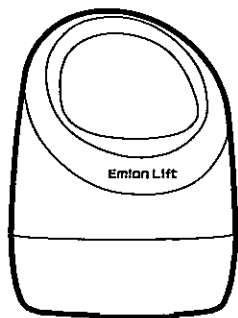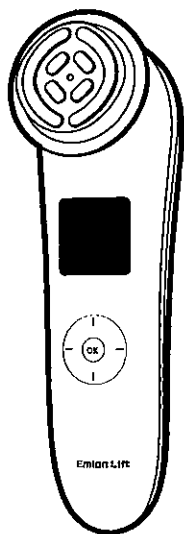

Emion Lift 本体 ×1 充電スタンド ×1 ACアダプタ ×1 取扱説明書 ×1

※本体やその他付属品や製品仕様は予告なく変更になる場合があります。


# 各部の名称

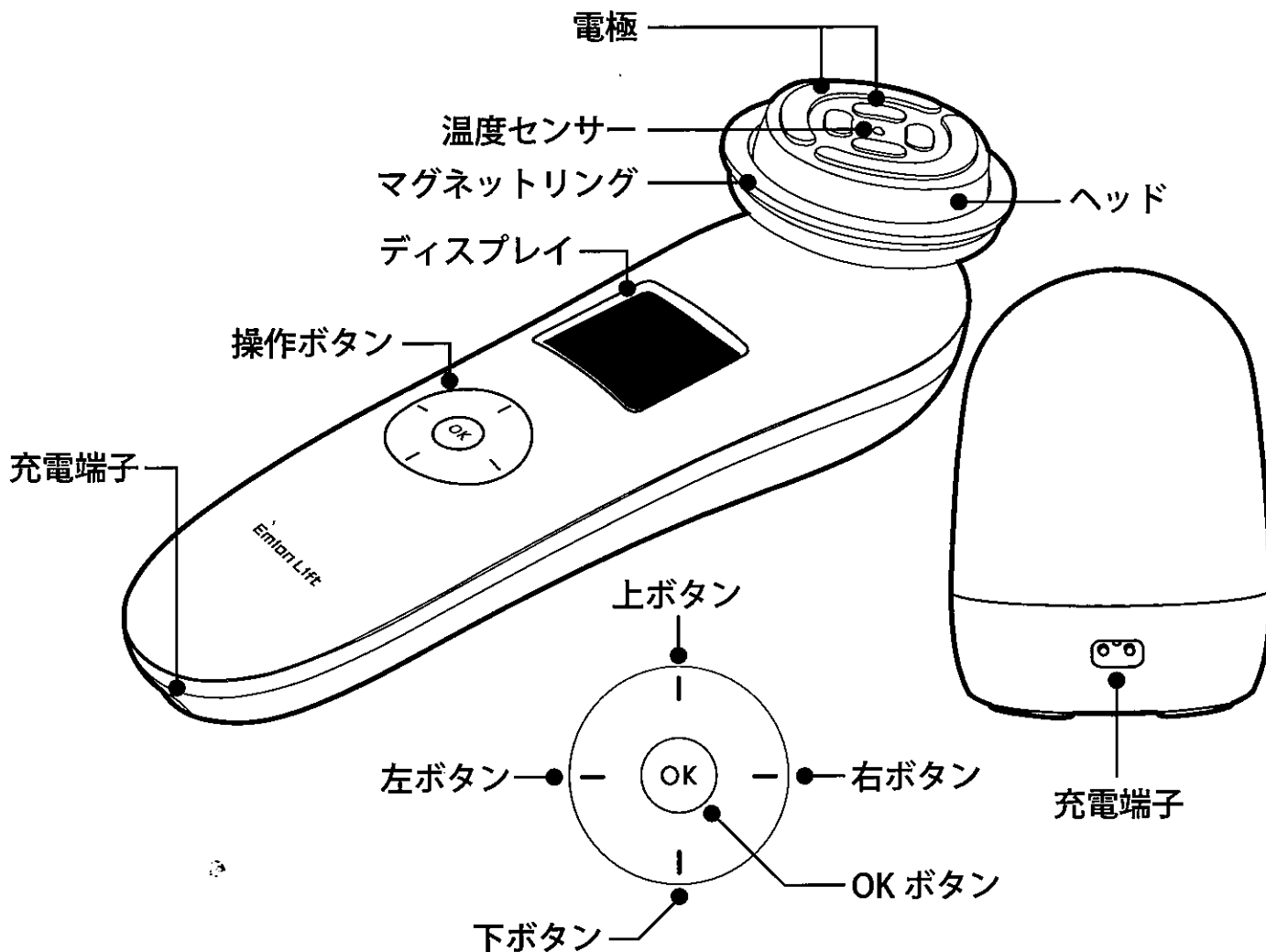



## 本体を充電する

初めて製品を使う時、本体が充電切れになった時は以下の手順で充電を行ってください。


1 ACアダプタを家庭用コンセントへ差し込みます。

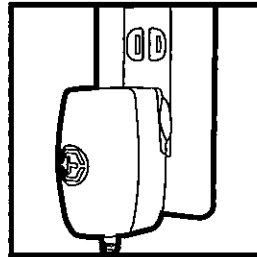

2 充電ケーブルを充電スタンドもしくは本体の充電端子に差し込みます。

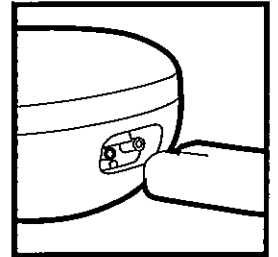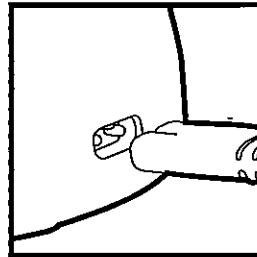


3 充電スタンドに充電ケーブルを差し込んだ場合は右図のように充電スタンドに本体をセットしてください。

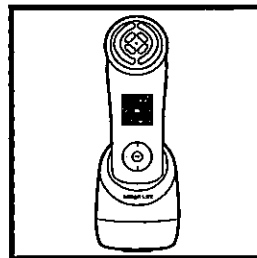


4 充電が開始されるとディスプレイに電池のアイコンが表示されます。充電時間はおよそ3時間30分になります。

## 電源のオン・オフ



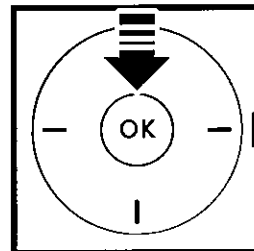

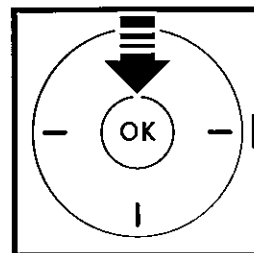


1 ディスプレイに何も表示されていない状態でOKボタンを押すと電源が入ります。電源が入るとロゴが表示された後メニュー画面が表示されます。



2 ディスプレイにメニュー画面が表示されている状態でOKボタンを押し続けるとディスプレイに「電源をOFFにします。」と表示され電源が切れます。



## 各コースについて

モード	概要	機能	コットン 使用の有無	使用する化粧水等 (※2)	合計時間 (既定)	使用頻度の 目安
 美顔フルコース	Emion Lift でできるすべての機能を順番に用いて顔に必要なケアを行います。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・イオン導出</li> <li>・イオン導入</li> <li>・RF+EMS</li> <li>・COOL</li> </ul>	有 / 無 (※1)	化粧水やジェル等	14分	週2～3回
 うるおいコース	お肌の汚れを取り除き、お使いの化粧水などでお肌にうるおいを与えて最後に引き締めを行います。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・イオン導出</li> <li>・イオン導入</li> <li>・COOL</li> </ul>		化粧水等	9分	
 引締めコース	顔のVライン（左右のこめかみと顎を繋いだライン）の筋肉を鍛え引き締めます。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・RF+EMS</li> <li>・COOL</li> </ul>	無	ジェル等	8分	
 VC補給コース	お肌にうるおいを与える機能と引き締めを行います。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・イオン導入</li> <li>・COOL</li> </ul>		化粧水等	6分	
 フリーモード	RF・EMS・COOL・イオン導出・イオン導入・RF+EMSの中で好きな機能を使えます。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・RF</li> <li>・EMS</li> <li>・COOL</li> <li>・イオン導出</li> <li>・イオン導入</li> <li>・RF+EMS</li> </ul>	有 / 無 (※1)	化粧水やジェル等		—
 肌へのあてかた	本体を肌へどのようにあてるのかをイラストと文章で説明しています。					
 設定	Bluetoothの接続状態や本体の初期化を行います。					

※1 コットンをつけずにイオン導出を行うと、お肌に汚れが残る場合がありますので、ご使用後は汚れを取り除いてください。

※2 ご使用になる化粧水やジェル等は Emion Lift 専用のものでお勧めします。


Emion Lift 専用以外の化粧水やジェル等をご使用になると、電極部分が発熱しやけどや故障の原因になる場合があります。

## 各機能について



イオン導出

コットンをヘッドに装着し化粧水（水や精製水でも可）を染み込ませ、通常の洗顔では落としきれない汚れを電気力で引き出します。

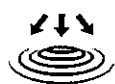

イオン導入

洗顔した後に化粧水（イオン導入対応品）を塗り使用します。お肌の角質層まで美容成分を浸透させます。



EMS

EMSで筋肉を刺激してハリと弾力をアップさせます。ご使用前にジェル等を塗ってください。



RF

RF（ラジオ波）でお肌を温めます。ご使用前にジェル等を塗ってください。



COOL

冷却機能によってお肌を引き締め、張りのあるお肌に導きます。

## スマートフォンアプリとの連動

Emion Lift は専用のスマートフォンアプリ「Emion Lift」と連動して、スマートフォン上でレベルの調節やガイド、電子版の説明書等の参照ができます。

アプリのダウンロードは Android 端末をお持ちの方は GooglePlay から、iOS 端末をお持ちの方は App ストアから「Emion Lift」にて検索してください。

※アプリは随時内容を更新しているため、下記項目の内容はアプリの内容と違っている可能性がありますのであらかじめご理解ご了承ください。

※前述の通りアプリは随時内容を更新しているため、アプリの使用方法についてはアプリ内の説明をご確認ください。

## 本体とアプリを Bluetooth で接続する

EmionLift 本体とアプリは Bluetooth で接続します。

- 1 スマートフォンの Bluetooth 機能をオンにします。
- 2 Emion Lift 本体の電源を入れてメニュー画面を表示しておきます。
- 3 アプリを立ち上げます。
- 4 アプリの「Emion Lift を接続する」を選択すると自動的に Emion Lift 本体とアプリが接続されます。
- 5 接続が完了したらアプリから各モードのレベルや時間の調節など操作できます。



# ディスプレイの見方と画面




表示	表示の意味
LEVEL	各機能のレベル (強さ)
Bluetooth icon	Bluetooth 機能のオン / オフ
Lightning bolt icon	本体直接充電中に表示
Battery icon	内蔵充電電池の充電量
● 3:00 / ◀ 戻る	各機能の残り時間 / 前へ戻る
次へ▶ / スタート▶	次へ進む / 機能を始める



## メニュー画面

美顔フルコースや引締めコースなどの各コースや各種設定、肌へのあてかたなどを選択する画面になります。

操作ボタンの上下で項目を移動し、OK ボタンで選択します。

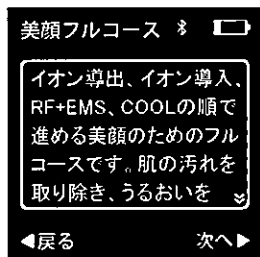

## 説明画面

各機能の内容や設定等で説明がある場合に表示されます。

操作ボタンの上下で説明をスクロールさせて、左右で戻るもしくは次の画面を表示させたり、機能をスタートさせます。




## 機能画面

各機能を使用中に表示されます。


操作ボタンの OK ボタンで一時停止、右ボタンで次の機能、上下ボタンでレベルの調節ができます。

## コットンのつけ方

1 本体の電極の周りにあるマグネットリングを取り外します。

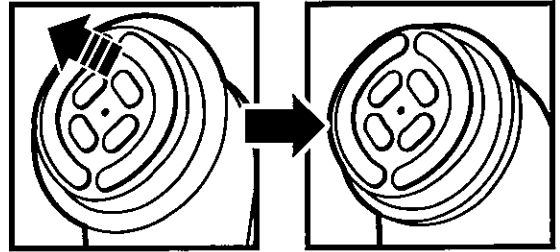

2 電極部分へ被さるようにコットンをつけてマグネットリングを押し込みコットンを固定します。固定し終わったら化粧水（水や精製水でも可）をコットンに染み込ませます。

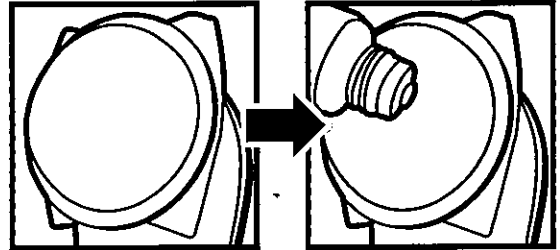

※コットンが厚すぎるとRFの温感が伝わりにくくなる場合があります。

※化粧水やジェル等が電極に塗布されている状態で、出力したまま本体を放置しないでください。

Emion Lift 専用以外の化粧水やジェル等をご使用になると、電極部分が発熱しやけどや故障の原因になる場合があります。

## 基本の使用方法

1 化粧を落として洗顔し、お肌を清潔な状態にします。  
（クールモードは化粧の上からでも使用できます。）

2 電源を入れて各モードを選択します。  
必要な場合は本体にコットンを装着して化粧水（水や精製水でも可）を染み込ませます。ご使用になる化粧水、ジェル等は Emion Lift 専用のものをお勧めします。

3 次ページ『肌へのあて方』を参考に各機能を使用していきます。


4 使い終わったらクリームなどでお肌を整えます。

## 使用上の注意

- COOL 機能以外は目の周りやまぶたには使用しないでください。
- 本体は必ずお肌の上を移動させながら使用してください。本体を止めて同じ部分に使用し続けるとやけどの恐れがあります。
- 化粧水やジェル等が電極に塗布されている状態で、出力したまま本体を放置しないでください。Emion Lift 専用以外の化粧水やジェル等をご使用になると、電極部分が発熱しやけどや故障の原因になる場合があります。

## 肌へのあてかた

各機能を使う際は下記のような順番で肌へあてると効果的です。

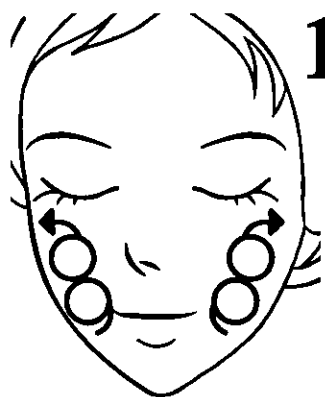

**1** 顔の中心から外へ、  
また下から上へ  
ゆっくり円を描く  
ように動かします。



**2** 額の中心から顔の外  
へゆっくり動かします。



**3** 鼻筋に合わせてゆっ  
くり上に動かします。



**4** あごから額にかけて  
ゆっくり上へ移動  
させます。

## 本体のお手入れ

使用后、製品を清潔に保つため毎回お手入れをしてください。

**1** 本体の電源をオフにします（充電状態にはしないでください）。

**2** 水で濡らし固く絞った布で、電極やマグネットリングの汚れ等を拭き取ります。  
※アルコールやシンナー、ベンジン、アルカリ洗剤等は使用しないでください。  
※化粧水やジェルなどが付着した状態にはしないでください。

**3** 電極やマグネットリング以外の汚れは乾いた布で拭き取ります。

## こんな時には

本製品をご使用中に異常を感じたら以下の症状がないか確認してください。

症状	考えられる原因	対処方法
充電ができない	ACアダプタの充電ケーブルが本体や充電スタンドにきちんと差し込まれていない	プラグを本体の奥まで差し込んでください (05 ページ)
	ACアダプタが家庭用コンセントにきちんと差し込まれていない	ACアダプタを家庭用コンセントに差し込んでください
電源が入らない	OK ボタンが正常に押されていない	操作ボタンの OK ボタンのみ押してください
	充電がされていない	充電を行ってください (05 ページ)
充電をしても数分しか使えない	充電量が不足している	充電を行ってください (05 ページ)
	間違えて OK ボタンを押し続けてしまっている	OK ボタンを押さないよう本体を握ってください
	充電電池の寿命が過ぎている	販売店もしくはメーカーへご連絡ください
本体が熱くなっている	連続して使用し続けた	1 度電源をオフにして本体が冷えるまで安全なところで放置してください
スマートフォンアプリに接続できない	スマートフォンの Bluetooth 機能がオンになっていない	スマートフォンの設定画面等から Bluetooth をオンにしてください
	スマートフォンアプリから接続をしていない	スマートフォンアプリ上から「Emion Lift を接続する」で接続してください

症状	考えられる原因	対処方法
イオン導入 / 導出・EMS で痛みを感じたり、ピリピリする	レベルが高い	操作ボタンの下ボタンでレベルを下げてみてください
	電極全体がお肌にあたっていない	電極全体がお肌にあたるよう角度を変えるなどしてください
イオン導入 / 導出・EMS が弱く感じる	レベルが低い	操作ボタンの上ボタンでレベルを上げてみてください
	お肌が乾燥していたり水分が足りていない	化粧水やジェルでお肌に水分を与えてから使用してください
EMS で筋肉が動くのが感じられない	筋肉に沿ってあてていない	電極を「肌へのあて方」(10 ページ) を参考に筋肉に沿ってあててください
RF が熱く感じる	使用している機能のレベルが高い	操作ボタンの下ボタンでレベルを下げてみてください
	電極を肌にあてている時間が長い	使用中は常に移動させ続けてください
RF の熱さを感じない	使用している機能のレベルが低い	操作ボタンの上ボタンでレベルを上げてみてください
	電極を肌にあてている時間が短い	本体の移動速度が速すぎる可能性があります

## リチウム電池の交換について

本体に内蔵されているリチウム電池の交換は感電やケガの恐れがありますので、お客様自身で行なわず販売店またはメーカーへお問い合わせください。

## 本体とリチウム電池の破棄について

本体にはリチウム電池が内蔵されていますので、本体を破棄する時はお住まいの各自治体のルールに従い決められた方法にて破棄してください。

## 製品仕様

電圧（充電）	DC9V
電流（充電）	約 400mA
充電時間	約 3 時間 30 分
ディスプレイピクセル	240×240
ディスプレイサイズ	1.5 インチ
上下ボタン機能	選択、レベル調整
左右ボタン機能	選択
OK ボタン	確認、電源のオン / オフ
レベル	5 段階
使用環境温度	0 ～ 40℃以下

※製品の仕様は予告なく変更になる場合があります。

## カスタマーセンター（問い合わせ先）

製品に関するお問い合わせは、下記カスタマーセンターまでご連絡ください。

電話番号：045-900-2747

受付時間：平日 11 時 00 分～ 13 時 30 分 14 時 30 分～ 18 時 00 分

## 製品保証に関して

- 万一、保証期間内に製品が故障した場合は無償にて修理あるいは交換致します。修理あるいは交換にて返却された製品やその付属品等の所有権は全て弊社に帰属するものと致します。
- 本製品の使用または故障によって生じた損害について、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品が不良でない限り交換または返品を承ることはできかねます。また、使用方法が分からない等の理由による交換や返品もお受け致しかねます。

## 製品の修理・交換に関して

- 保証期間内の修理または交換の際は本製品をご購入になった販売店までご連絡ください。製品の故障状況によってはお客様に送料や修理費用、交換費用をご負担頂く場合もございますので、あらかじめご了承ください。
- あらかじめ故障のご連絡を頂けず、販売店や弊社からの指示もないまま製品を送付されましても対応はできかねます。
- 製品の修理あるいは交換の際の製品は本体や付属品などが全てそろったご購入当時と同一の状態が条件となります。

## 免責事項

次の場合、保証期間内であっても保証対象外となります。

- 保証書の提示がない場合、記入漏れがある場合、改ざん等がある場合
- 輸送 / 落下 / 衝撃など製品のお取り扱いが不適切なために生じた故障や損傷
- 環境や設備の不備、使用方法や注意事項に反するお取り扱いによって生じた故障や損傷
- お客様の責に帰すべき事由により生じた機能に影響のない外見上の損傷
- お客様の故意または重過失により生じた故障や損傷
- 火災、地震、水害、落雷、塩害その他天変地異や異常電圧などにより生じた故障や損傷
- 製品の譲渡により入手したり、製品を分解 / 改造した場合
- 内蔵バッテリーの消耗

## 製品保証規定

本製品の保証期間はご購入日（商品到着日）から1年間になります。

- 本取扱説明書に従い正常な使用状態で万一故障した際は、本保証書をご用意の上本製品をご購入になった販売店までご連絡ください。
- 保証期間内であっても次の場合は有償となる場合がございます。
  - 1) 本保証書を提示されない、記入漏れがある、改ざん等が認められた場合
  - 2) 使用方法の誤り、不当な修理 / 調整 / 改造等による故障や損傷
  - 3) 本製品に接続している他の機器に起因して生じた故障や損傷
  - 4) お買い上げ後の輸送や移動、落下や衝撃等不当なお取り扱いにより生じた故障や損傷
  - 5) 火災、天災、公害、落雷、塩害や異常電圧等による故障や損傷
- 本保証は日本国内のみ有効です。
- 製品保証に関して、製品の修理・交換に関して、免責事項も併せてご確認ください。

保証期間	お買い上げ日（商品到着日）より1年間	お買い上げ日（商品到着日）	年      月      日
お客様	ご住所（〒                      ）      ご氏名		電話番号
販売店	住所		電話番号

製造・販売元：ヒロセ電機株式会社    住所：〒224-0003    神奈川県横浜市都筑区中川中央 2-6-3