

ヒロセ電機ME事業課は移転に伴
い連絡先は下記の通り変更となり
ました。

〒224-8540

神奈川県横浜市都筑区

中川中央2-6-3

T E L : 045-620-3589

F A X : 045-591-3727

NeuroPulse Roller

ニューロパルスローラー

取扱説明書／保証書

このたびはニューロパルスローラーをお買い上げいただきまことにありがとうございました。

お使いになる前に、この取扱説明書をかならずお読みになり、正しくお使いください。

保証書もかねておりますので、お読みになったあとも大切に保管してください。

—目次—

安全上のご注意	P 2～3
保証規定	P 4
製品仕様	P 4
各部の名称	P 5
はじめてお使いになる前に	P 5
使い方	P 6、8
保証書	P 7



1

●安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他人への危害や損害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですのでかならず守ってください。

⚠ 危険

危険防止のため下記医用電気機器との併用は、誤動作を招く恐れがありますので使用しないでください。

- ・ペースメーカー、植込み型除細動器などの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器
 - ・心電計などの装着形の医用電気機器
- (これらの医用電気機器の誤動作をまねき、生命に著しい障害をもたらす原因になります。)

危険防止のため、次の人は、使用しないでください。

- ・悪性腫瘍のある人・心臓に障害のある人（特にペースメーカーを使用している人）
- ・妊娠している人または出産直後の人
- ・熱の高い人
- ・安静を必要とする人
- ・急性疾患、疼痛性疾患のある人
- ・知覚障害のある人や意思表示のできない人
- ・適正部位の皮膚に異常のある人
- ・金属アレルギーがある人。

(事故や体調不良を起こす恐れがあります。)

⚠ 警告

機器は分解および改造をしないでください。故障した場合には勝手にいじらず、販売店または、製造販売元に連絡してください。(感電や事故、故障の原因になります。)

目に触れたり、口の中に入れてください。

(感電や事故、故障の原因になります。)

本品は防水仕様ではありません。水や化粧水につけたり、ぬらしたりはしないでください。

また浴室などの湿度の高いところや、入浴しながらの使用、ぬれた手での操作はしないでください。

(感電や事故、故障の原因になります。)

2

●保証規定

- (1) 取扱説明書に従って正常な使用状態でお買い上げ後6ヶ月以内に故障した場合には、無償修理いたします。
- (2) 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店または製造販売元にご連絡ください。
- (3) 次の場合には、無償修理期間内でも有償修理となります。
 - イ) 使用上の誤り、及び不当な修理や改造による損傷。
 - ロ) 故障の原因が本製品以外に起因する場合。
 - ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変の不可抗力による故障。
- 二) 本書の提示がない場合
- ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合。あるいは、字句を置き換えられた場合。
- (4) 本書は日本国内においてのみ有効です。
- (5) 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

●製品仕様

販 売 名	ニューロパルスローラー
本 体 寸 法	Φ 14 mm × 126 mm
本 体 重 量	30 g (電池含む)
材 料	ローラー、グリップ：アルミ＋クロムメッキ 電装部：ABS樹脂
電 源	アルカリボタン電池 (LR41) 2個 DC3.0V
モ ー ド	低周波モード、マイクロカレントモード の2モード
付 属 品	ソフトケース

⚠ 注意

本品の使用により、発疹、発赤、かゆみなどが現れた場合は、直ちに使用を中止してください。(体調不良を起こす恐れがあります。)

ローラー部、グリップ部が金属性のもの（ネックレス、指輪など）にふれないようにしてください。(強い刺激を受けます。)

落としたり、踏んだり、折り曲げたりなどの強い衝撃を機器に与えないでください。(事故や故障の原因になります。)

本品を使用する前に、かならず本品が正常に作動することを確認してからご使用ください。(事故の原因になります。)

使用後は、ローラー部に付着した汗や皮脂などをふき取り、清潔に保管してください。(さびや故障の原因になります。)

汚れをとるときは、かならず電源を切った状態で、から拭きか、水、または中性洗剤をしみこませた布で拭いてください。(感電や事故、故障の原因になります。)

さびたローラーは使用しないでください。(事故やけがの原因になります。)


長期間使用しない場合は、本品よりボタン電池を取り外して保管してください。(故障の原因になります。)

電池交換の際は、アルカリボタン電池 (LR41) 以外の電池は使用しないでください。(事故や故障の原因になります。)

3


4

●各部の名称

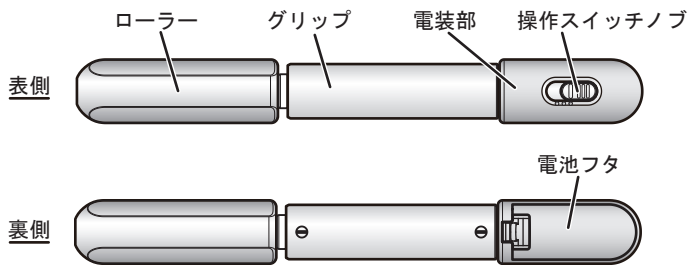

●はじめてお使いになる前に

①電池フタを開ける

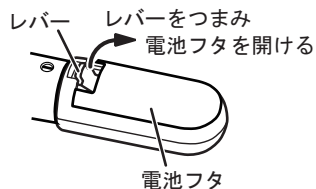


②電池フタ裏面のシールをはがす



④電池フタをしめる



③電池を下図のようにセットする

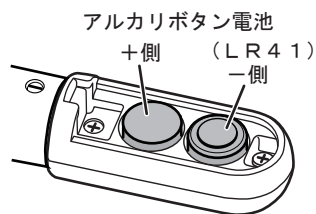


⑤レバーを押し込む



5

●使い方


①操作スイッチノブを下図のように、一番左にスライドさせる

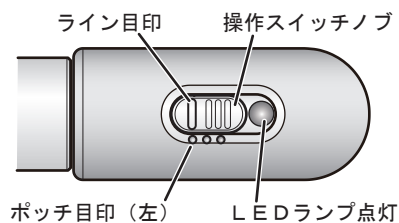

操作スイッチノブを一番左にスライドさせると、操作スイッチノブ内側のLEDランプが点灯します。操作スイッチノブを離すと自動的に中央にもどり、LEDランプは点滅します。LEDランプが点灯しない場合または点灯が暗い場合は、電池残量がありませんので電池を交換してください。

②低周波モード (肌に感じるEMS電流)

顔筋のトレーニングに適しています。顔を水で湿らせ、ローラーを押し付けてください。

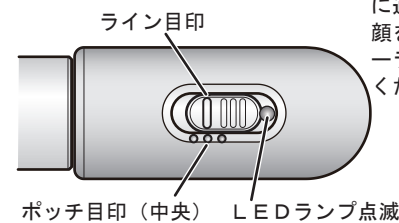

操作スイッチノブの位置を中央 (操作スイッチノブを離し自動的にもどった位置) にセットすると低周波モードになります。ローラーとグリップを同時に手で握るとビリビリ感があります。(ビリビリ感は、汗の具合、握りかたなどで個人差があります。) 低周波モードでは、LEDランプがゆっくりと点滅します。

6

保証書

このたびは、ニューロパルスローラーをお買い上げいただきまことにありがとうございました。本品は厳重な検査を行い高品質を確保しております。しかし、お客様の正常なご使用において万が一故障した場合には、保証規定によりお買い上げ後6ヶ月間は本体を無償修理いたします。また、ソフトケースとアルカリボタン電池につきましてはその限りではありませんので、お取り扱いに関しましてはご注意ください。


お客様名	フリガナ
電話番号	()
お客様ご住所	(〒 -) 都道府県

品名	ニューロパルスローラー
購入年月日	
保証期間	ご購入日から6ヶ月間
販売店	印

製造販売元：ヒロセ電機株式会社 ME事業課
〒222-8566 神奈川県横浜市港北区菊名7-3-13
TEL 045-402-7714 <http://www.hirose-me.com/>

7

③マイクロカレントモード (肌に感じない微弱電流)

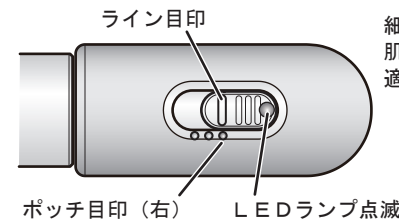


細胞を活性化させ、肌のたるみの改善に適しています。

操作スイッチノブを一番右にスライドさせるとマイクロカレントモードになり、ローラーとグリップの間に肌には感じないマイクロカレント (微弱な電流) が流れます。マイクロカレントは手で握ってもビリビリ感じません。マイクロカレントモードでは、LEDランプがはやく点滅します。

④ご使用に際して

ご使用の際は、かならずグリップを手で握り、ローラーを肌にあててご使用ください。電装部を手で握っても通電しません。

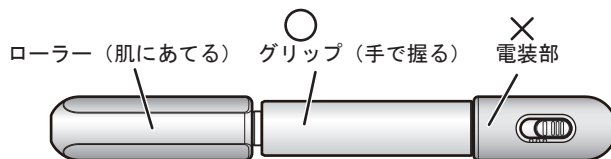

・本品はタイマー機能が付いております。低周波モード、マイクロカレントモードともに約20分で自動的に電源が切れます。
・使用中でモードを替えるとタイマーはリセットされます。
・途中で使用をやめるときは、操作スイッチノブを2秒以上、一番左に移動させてください。指を離すと電源が切れます。



8